

Wissers : overzicht, toepassing en gebruik

eSwab standaard (roze stop, dikke wisser)
vaginaal, cervicaal, keel, wonde, etter ...



- ✓ Bacteriële kweek (aeroob, anaeroob, gisten) en Gramkleuring
- ✓ MRSA screening op één afnameplaats
- ✓ Snelle antigen testen (Strep A)
- ✓ PCR onderzoek
 - SOA screening vrouw (CT/NG/TV/MG)
 - Herpes simplex, Varicella zoster letsel
 - Respi screen viraal (keel/neus) (Cor/Flu/RSV)

Volgende testen kunnen **NIET** worden uitgevoerd op de eSwab standaard : **PCR respi screen bacterieel** (vals positief resultaat voor *Bordetella parapertussis* mogelijk), **snelle antigen testen op rectale wissers**.

eSwab fijn (oranje stop, fijne wisser)
nasopharyngeaal, urethraal



- ✓ Bacteriële kweek (aeroob, gisten)
- ✓ PCR onderzoek
 - SOA screen man (urethraal) (CT/NG/TV/MG)
 - Respi screen viraal (nasopharynx) (Cor/Flu/RSV)

Volgende testen kunnen **NIET** worden uitgevoerd op de eSwab fijn : **PCR respi screen bacterieel** (vals positief resultaat voor *Bordetella parapertussis* mogelijk).

Virus Stabilization Tube (rode stop, fijne wisser) ook 'Covid-wisser' genoemd sinds pandemie ...
nasopharyngeaal



- ✓ PCR onderzoek
 - Coronavirus
 - Respi screen viraal (nasopharynx) (Cor/Flu/RSV)
 - Respi screen bacterieel (nasopharynx) (MP/CP/BP)

Volgende testen kunnen **NIET** worden uitgevoerd op de Virus Stabilization Tube : **bacteriële kweek**.

Transwab met dubbele wisser
MRSA screening



- ✓ MRSA screening meerdere plaatsen

Volgende testen kunnen **NIET** worden uitgevoerd op de Transwab met dubbele wisser : **PCR onderzoek, snelle antigen testen**.

CT/NG/TV/MG = *Chlamydia trachomatis*, *Neisseria gonorrhoeae*, *Trichomonas vaginalis*, *Mycoplasma genitalium*
Cor/Flu/RSV = Corona, Influenza A en B, Respiratoir syncytieel virus
MP/CP/BP = *Mycoplasma pneumoniae*, *Chlamydia pneumoniae*, *Bordetella (para)pertussis*


Beneluxpark 2 – 8500 Kortrijk – Tel. +32 (0)56 22 68 82 – Fax +32 (0)56 20 35 06
Oude Veurnestraat 1c – 8900 Ieper – Tel. +32 (0)57 20 52 30 – Fax +32 (0)57 20 83 88

biologen@bruyland.be
www.bruyland.be

ANALYSING YOUR FUTURE

Procedure afname eSwab / Virus Stabilization Tube

- Open de verpakking en haal de wisser en het buisje met transportmedium eruit (raak hierbij de wisser zelf niet aan en houd de wisserstok vast boven het breekpunt!)
- Voer de staalafname uit
- Draai op steriele wijze de dop van het buisje met transportmedium en breng de wisser volledig in het buisje
- Breek de wisserstok af thv de inkeping en gooi dit bovenste deel weg
- Draai de dop opnieuw goed vast om lekkage te voorkomen
- Noteer de naam/voornaam van de patiënt op het buisje

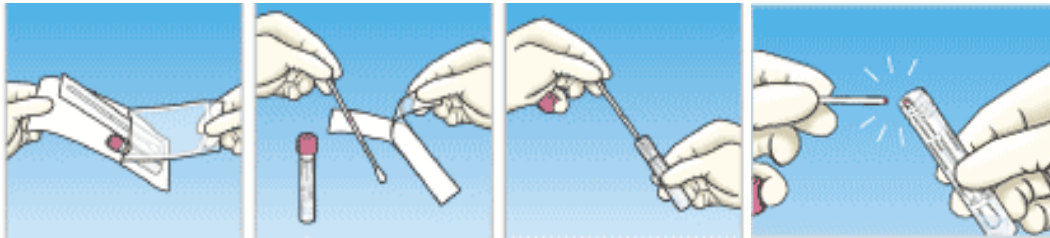

Procedure afname Nasopharyngeale wisser

Zie aparte afname richtlijn Nasopharyngeale wisser

Procedure afname MRSA screening

Zie aparte afname richtlijn MRSA screening dmv Transwab met dubbele wisser.

Bewaring en transport

In afwachting van transport dient de wisser koel bewaard te worden (2-8 °C).

Neisseria gonorrhoeae is sterk temperatuurgevoelig en zal vaak niet meer viabel zijn na bewaring op 2-8°C, waardoor deze pathogeen niet meer in cultuur kan gebracht worden; PCR detectie is echter de aangeraden techniek om een *N. gonorrhoeae* infectie aan te tonen en wordt niet beïnvloed door bewaring in de frigo.