

Aderlating: gebruik van Terumo bloedzakken


- Leg een stuwband aan, ontsmet de injectieplaats, decap de naald en prik aan.
- Fixeer de naald.
- Controleer of beide klemmen (wit en blauw) open zijn.
- Het eerste bloed zal automatisch worden afgeleid naar het kleine collectiezakje.



- Indien gewenst kunnen via de adapter ook bloedbuizen worden afgenomen.



- Sluit de blauwe klem zodat er geen bloed meer naar het kleine bloedzakje kan.
- “Breek” vervolgens de cliktip sluiting (dit is een soort terugslagklep) in de leiding zodat het bloed naar de grote bloedzak kan stromen (de witte klem, boven aan de grote bloedzak, moet open staan).
Klik op <https://vimeo.com/274775476> om deze uitleg te verduidelijken (rond minuut 1:20 wordt getoond hoe de cliktip gebroken moet worden).

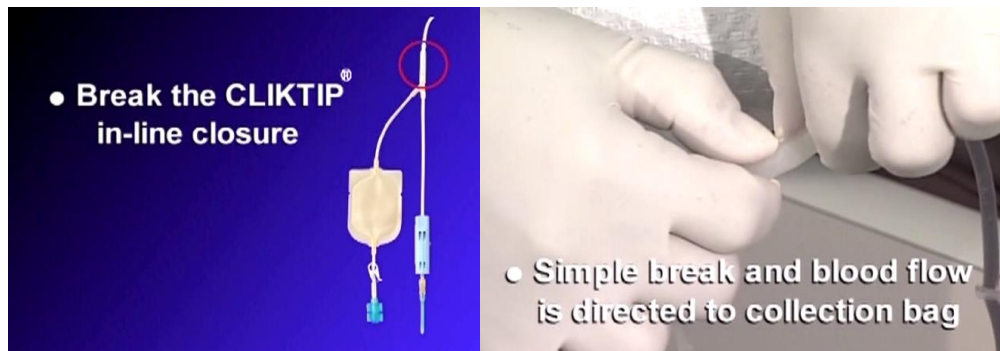

- Aan het einde van de afname de witte klem sluiten, stuwband verwijderen, naald uittrekken en goed drukken op de insteekplaats.